



smi

MATÉRIEL DE SUTURE

*Pour qualité
&
sécurité*



smi

www.sutures.be

SMI: Matériel de suture de haute qualité

SMI AG a été fondée en 1987. Elle a été la première entreprise belge à fabriquer des ligatures chirurgicales. Depuis, elle a connu une croissance rapide et est aujourd'hui reconnue comme un fournisseur mondial de ligatures chirurgicales.

La société est située à St. Vith, dans l'est de la Belgique, à proximité de la frontière entre la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

UN STANDARD ELEVE DE QUALITE ET DE SECURITE

SMI s'aligne sur les normes internationales de qualité telles que la norme EN ISO 9001 et EN ISO 13485 ainsi que les normes GMP. Tous les matériaux utilisés ainsi que les produits finis sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux par une équipe dédiée afin que les sutures chirurgicales répondent aux exigences les plus élevées. SMI est dédiée à la satisfaction des clients en assurant des produits de haute qualité et un excellent service sur base de l'orientation client, la fiabilité et la performance de livraison.

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

SMI exporte dans 80 pays différents dans le monde entier. Ce succès a été couronné par le „Royal Export Award 2000“ de l'OBCE (l'Office Belge du Commerce Extérieur).


LE CATALOGUE

Dans ce catalogue, vous trouverez une présentation de tous les articles disponibles actuellement. Si un client a besoin d'un article ne figurant pas dans ce catalogue, celui-ci peut être produit sur demande. Nous développons constamment notre gamme de produits sur base de l'évolution du marché et des besoins de clients.


SMI offre toutes les tailles de fils de USP 12/0 jusqu'à USP 6 permettant aux chirurgiens d'opérer dans toutes les spécialisations, y compris la cardiologie, l'ophtalmologie et la microchirurgie.

Depuis de nombreuses années les produits SMI sont reconnus par les meilleurs chirurgiens dans le monde entier.



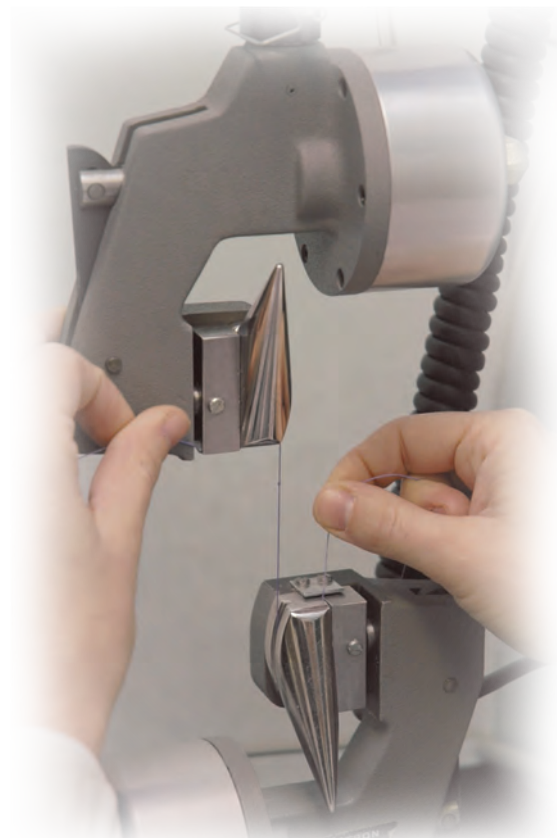

1 20 01 15 2 P

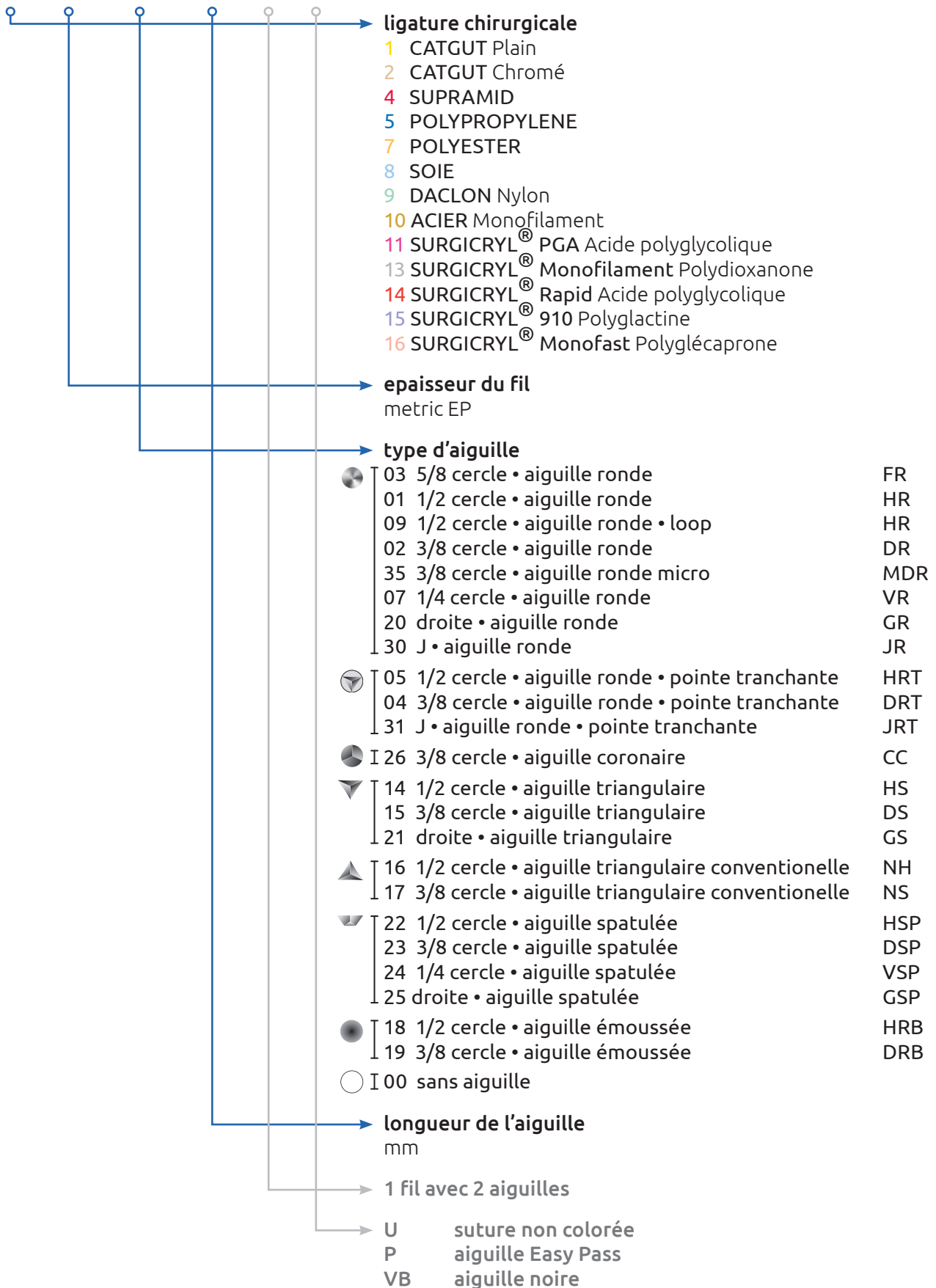

Les aiguilles chirurgicales SMI sont fabriquées à partir des meilleures grades d'acier inoxydable afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant une ductilité et un moment de flexion excellente. Une technologie avancée de revêtement en silicone de l'aiguille assure une pénétration en douceur afin de réduire le traumatisme tissulaire du patient. La forme du corps de l'aiguille est conçue de manière à permettre le maximum de stabilité dans le porte-aiguille.

5/8 CERCLE





1/2 CERCLE

3/8 CERCLE

1/4 CERCLE


J-NEEDLE

DROITE

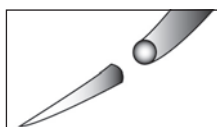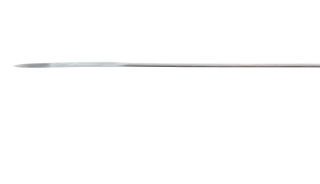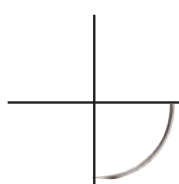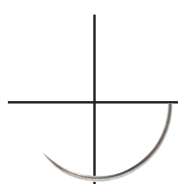


AIGUILLE RONDE

Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe.

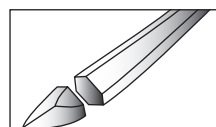


AIGUILLE SPATULÉE

Aiguille avec deux côtés tranchants.

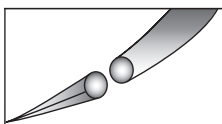


AIGUILLE RONDE À POINTE TRANCHANTE

Un corps rond se réduisant en pointe effilée, tranchante.

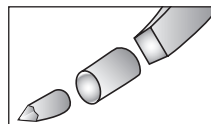


AIGUILLE CORONAIRE

Une pointe minutieuse suivie d'un corps rond et un corps principal rectangulaire pour une meilleure pénétration dans le tissu cardio-vasculaire.

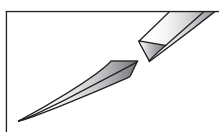


AIGUILLE TRIANGULAIRE TRANCHANT EXTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure convexe externe.

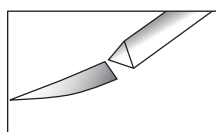


AIGUILLE TRIANGULAIRE CONVENTIONNELLE TRANCHANT INTÉRIEUR

Un corps triangulaire offre un troisième bord tranchant à la courbure concave interne.

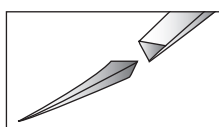

AIGUILLE EASY PASS

Pointe de précision avec tranchant extraordinaire.

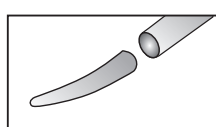


AIGUILLE ÉMOUSSÉE

Aiguille cylindrique avec pointe arrondie. Pour les tissus mous tels que foie et reins. Réduction des risques de blessures accidentelles.

- ✓ *Tranchante et forte*
- ✓ *Passage aisé*
- ✓ *La même sensation qu'au premier passage à chaque passage*

L'aiguille Easy Pass combine 3 technologies de pointe vers une aiguille de précision de première qualité:

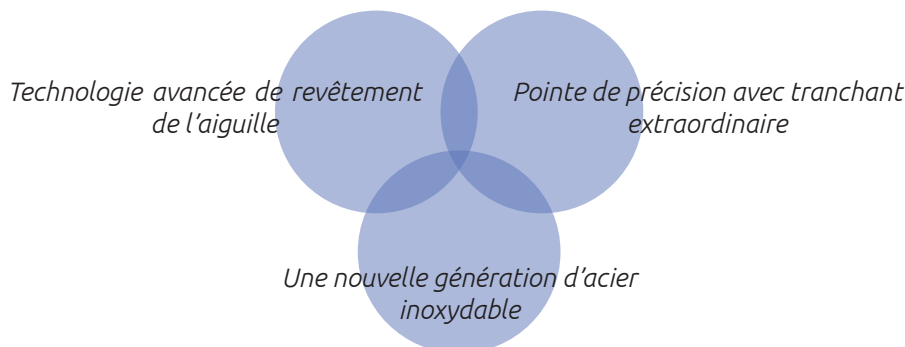

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Pointe de précision avec tranchant extraordinaire
- ✓ Une nouvelle génération d'acier inoxydable
- ✓ Technologie avancée de revêtement de l'aiguille
Revêtement en silicone couvre l'ensemble de l'aiguille chirurgicale

AVANTAGES


Excellente pénétration pour réduire le traumatisme du patient et préserver l'intégrité intime
Pénétration optimale et prévisible
Aiguille tranchante sur une multiplicité de passages

Significativement plus pénétrante passage après passage
Meilleure résistance à la flexion et la rupture
Combinaison optimale entre résistance et flexibilité


Surface extrêmement lisse
Meilleure pénétration, contrôle et passage des aiguilles
Maintien du caractère tranchant de l'aiguille du début à la fin sur une multitude de passages

INDICATIONS Chirurgie cosmétique et plastique


Meilleure performance de pénétration de 40% - 50% par rapport à l'aiguille triangulaire standard

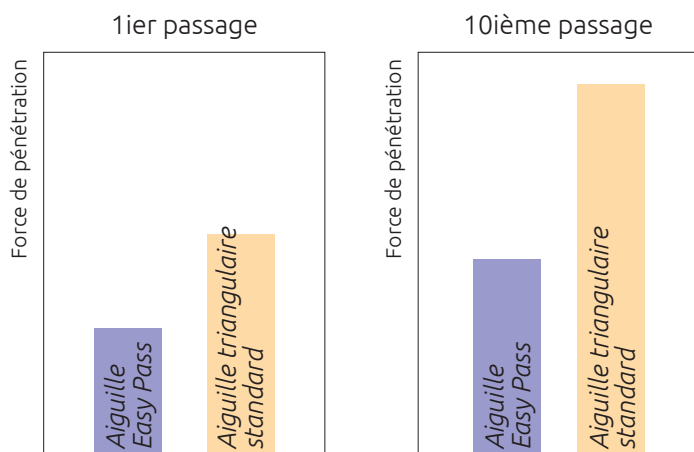

FILS RÉSORBABLES

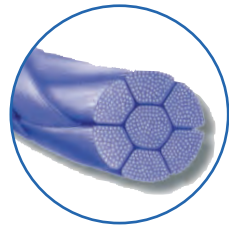


SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE

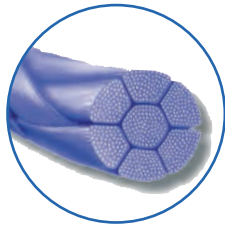


SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

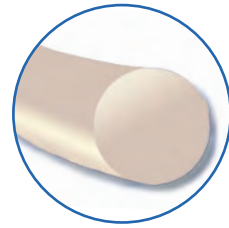


SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25

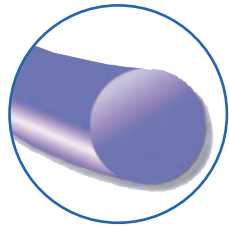

SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE

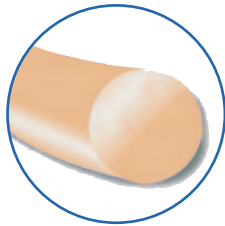


CATGUT
PLAIN

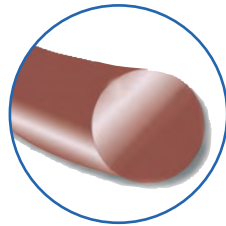

CATGUT
CHROM


FILS NON RÉSORBABLES

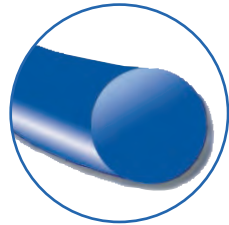


POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER

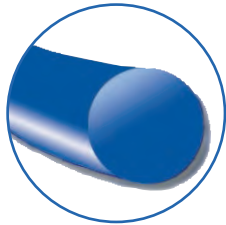


DACLON
NYLON
BLUE

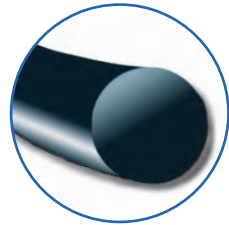


DACLON
NYLON
BLACK

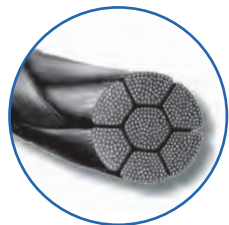


SILK
BRAIDED
BLACK

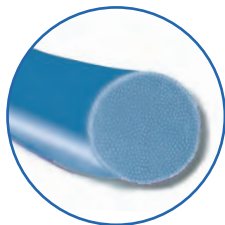

SILK
VIRGIN
BLUE

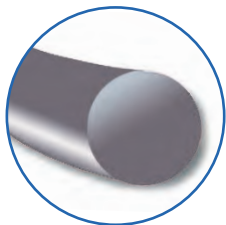



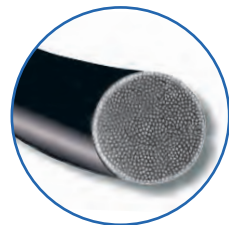




STEEL
MONOFILAMENT




SUPRAMID
BLACK

Matériel de suture en pochettes





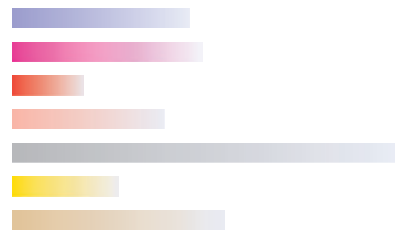

résorbable

-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactine
-  SURGICRYL[®] PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL[®] Rapid Acide polyglycolique
-  SURGICRYL[®] Monofast Polyglécaprone
-  SURGICRYL[®] Monofilament Polydioxanone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chromé

Diminution de la résistance à la traction avec le temps:



non résorbable

-  POLYPROPYLENE
-  DACLON Nylon
-  SUPRAMID Polyamide noir
-  SOIE Tressée
-  POLYESTER
-  ACIER Monofilament

Microchirurgie

résorbable

-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactine

non résorbable






-  DACLON Nylon
-  POLYPROPYLENE

Ophthalmologie

résorbable

-  SURGICRYL[®] PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactine

non résorbable

-  SOIE Vierge
-  SOIE Tressée
-  DACLON Nylon
-  POLYESTER
-  POLYPROPYLENE







Autres articles

- Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agraves
- Biopsy punch
- Support pour matériel de suture en pochettes
- Treillis de polypropylène
- Lames chirurgicales et bistouris
- Episio set
- Set de cerclage du col utérin









- Patella set
- Pilomat - écraseur et coupe-comprimés
- Aiguilles chirurgicales
- Marqueur pour la peau
- Cire à os
- SMI Spon - Éponge de gélatine résorbable

Matériel de suture en cassettes

résorbable

-  SURGICRYL[®] PGA Acide polyglycolique
-  SURGICRYL[®] PGA Plus Acide polyglycolique
-  SURGICRYL[®] Monofilament Polydioxanone
-  SURGICRYL[®] Monofast Polyglécaprone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chromé

non résorbable


-  SOIE Tressée noire
-  SUPRAMID Polyamide blanc
-  SUPRAMID Polyamide noir
-  LINFIL Natural
-  VITAFIL Polyester blanc
-  DERMAFIL Polyester vert
-  DACLON Nylon
-  Acier Monofilament

Pour des informations techniques plus précises référez vous à la notice dans l'emballage. Vous pouvez trouver la gamme complète de SMI sur www.sutures.be.

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

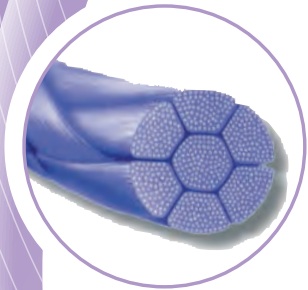

Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % - 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
 Fermeture de peau
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie plastique
 Chirurgie ophtalmologique
 Gynécologie
 Obstétrique
 Chirurgie orthopédique
 Urologie

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite


- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

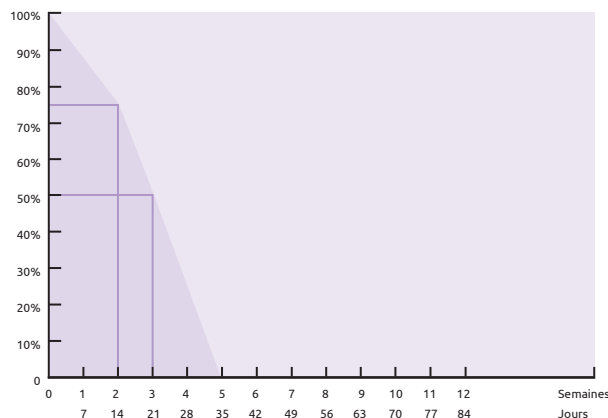

RÉSORPTION

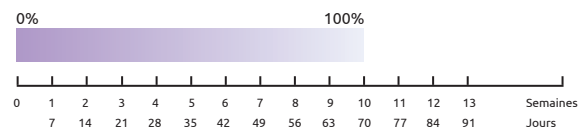

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violet</i>	15400075

Without needle












Ligapack












Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025




Round bodied taper point 

1/2 Circle 

		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	violet	15070113
		1	5/0	75 cm	violet	15100113
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	violet	15100117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150117
		2	3/0	75 cm	violet	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300117
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150122
		2	3/0	75 cm	violet	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300122
		4	1	75 cm	violet	15400122
		1.5	4/0	75 cm	violet	15150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200126
		3	2/0	75 cm	violet	15300126
		3.5	0	75 cm	violet	15350126
		4	1	75 cm	violet	15400126
		5	2	75 cm	violet	15500126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200130
		3	2/0	75 cm	violet	15300130
		3.5	0	90 cm	violet	15350130
		4	1	75 cm	violet	15400130
		5	2	90 cm	violet	15500130
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200136
		3	2/0	75 cm	violet	15300136
		3.5	0	90 cm	violet	15350136
		4	1	90 cm	violet	15400136
		5	2	90 cm	violet	15500136
HR 45 mm		2	3/0	75 cm	violet	15200140
		3	2/0	75 cm	violet	15300140
		3.5	0	75 cm	violet	15350140-75
		3.5	0	90 cm	violet	15350140
		4	1	75 cm	violet	15400140-75
		4	1	90 cm	violet	15400140
HR 45 mm		5	2	75 cm	violet	15500140-75
		5	2	90 cm	violet	15500140
		5	2	90 cm	violet	15500145

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
HR 48 mm 		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm 		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350160
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
1/2 Circle 	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
	HR 80 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180

Round bodied taper point loop 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

Round bodied taper point



3/8 Circle



Metric	USP	Length	Order number	
DR 17 mm	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i> 15150217
DR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200222
DR 30 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400230

Reverse cutting



1/2 Circle












Metric	USP	Length	Order number	
HS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 15071412
HS 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15101417
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15151417
HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15201422
HS 23 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15501423
HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15201426
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15301426
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15351426
	4	1	75 cm	<i>violet</i> 15401426
HS 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15201430
HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15301436
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15351436
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 15401436
	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15501436
HS 40 mm	2	3/0	90 cm	<i>violet</i> 15201440
	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 15301440
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15351440
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 15401440
HS 48 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15501440
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15351448
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 15401448
HS 60 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15501448
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15351460





Reverse cutting










Metric USP Length Order number






<p>3/8 Circle</p>	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
	DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
			2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
	DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530	
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301530UP-75	
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536	
DS 40 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540	
DS 45 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545	




Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150513
	HRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150517
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200517
	HRT 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300526
	HRT 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 15300530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 15350530
	HRT 36 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 15400530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 15300536
HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 15350536	
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 15400536	
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 15350540	
HRT 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 15400540	
	8	6	150 cm	<i>violet</i> 15800548	

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DRT 13 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150413
	DRT 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 15150417
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 15200417

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DRT 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 15100530-0413
1/2 Circle 	HRT 30 mm 				

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRB 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301830
	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
HRB 45 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845	

Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963

SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie plastique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

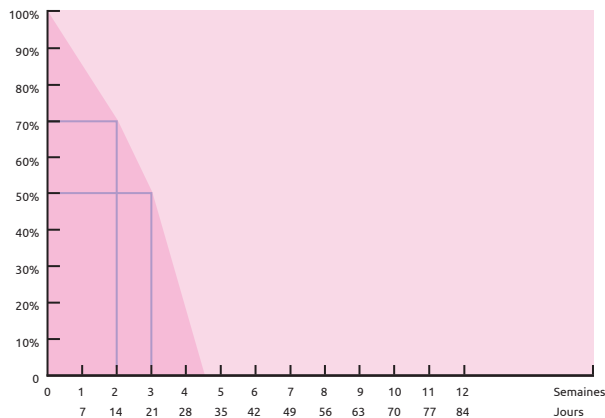

RÉSORPTION

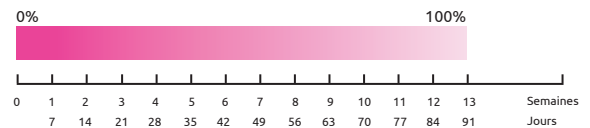

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	1160 0015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	1170 0015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
3.5	0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11350060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070

Without needle








Ligapack











Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025




Round bodied taper point




1/2 Circle






	Metric	USP	Length		Order number	
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113	
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113	
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113	
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117	
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117	
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117	
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117	
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122	
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122	
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200122U	
HR 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122	
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126	
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126	
HR 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U	
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126	
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126	
	HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U	
3.5		0	75 cm	<i>violet</i>	11350130	
4		1	75 cm	<i>violet</i>	11400130	
HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136	
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136	
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136	


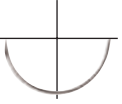

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148		


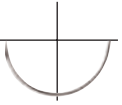





Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217
	DR 25 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400225




Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403040

Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number	
5/8 Circle  J-needle 	 	JR 36 mm FR 27 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 		HR 50 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

Round bodied tapercut point		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 		HRT 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300526
		HRT 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 11400530
		HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400536
		HRT 40 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 11400540
		HRT 48 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11500540
4			1	90 cm	<i>violet</i> 11400548	

Round bodied tapercut point		Metric	USP	Length	Order number	
J-needle 		JRT 31 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131





Reverse cutting


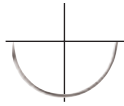











3/8 Circle






		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401536
	DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501536
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301426
	HS 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351426
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501430
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301436
	HS 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351448
4		1	90 cm	<i>violet</i> 11401448	
5		2	90 cm	<i>violet</i> 11501448	
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i> 11601448

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	NS 16 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et stéarate de calcium (1%)
Couleur	Beige - non coloré / Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls

spécialement Chirurgie plastique
 Obstétrique (épisiotomie)
 Gynécologie
 Urologie (circoncision)
 Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)
 Chirurgie pédiatrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide

Propriétés de manipulation excellentes
 Grande flexibilité
 Résistance à la traction élevée
 Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
 Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
 Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Ligature


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

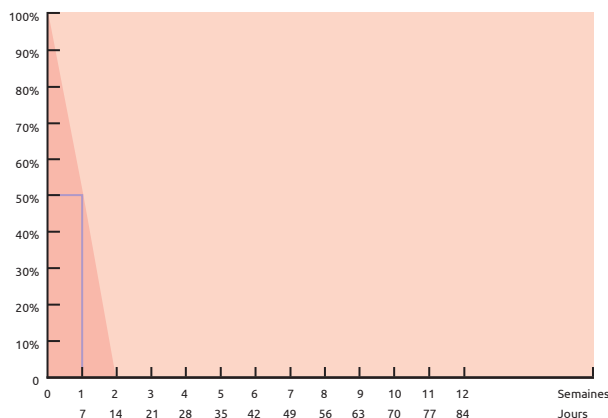

RÉSORPTION

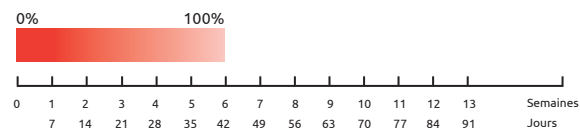

Without needle



	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
	3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
	3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
	4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
	5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015

Round bodied taper point



	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 40 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200136
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
HR 48 mm	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148


1/2 Circle



Reverse cutting



3/8 Circle

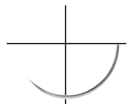

			Metric	USP	Length	Order number	
DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	14071512	
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101512	
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151512	
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	14071512P
			1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	14101512P
			1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151512P
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151516
			2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201516
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519
	DS 19 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301519
			1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151519P
			2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201519P
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201524
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301524
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201524P
3			2/0	50 cm	<i>undyed</i>	14301524P	
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201526	
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301526	
DS 26 mm		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351526	
		DS 30 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301536	
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351536	



Reverse cutting












1/2 Circle



			Metric	USP	Length	Order number
HS 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i>	14151417
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201417
HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351436
HS 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14351440
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14501440

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14202160


	Round bodied tapercut point 	Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRT 17 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200517
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350536
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400536
	HRT 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350540
4		1	90 cm	<i>undyed</i>	14400540	
HRT 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548	

	Round bodied tapercut point 	Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100416
	DRT 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200416

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLÉCAPRONE 25

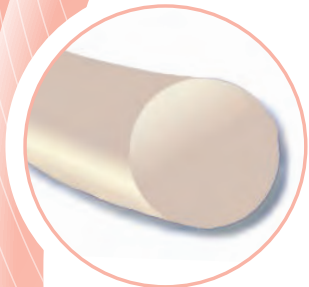

Type	Monofilament
Composition	Polyglécaprone 25, un copolymère fait de 75% glycolide et 25% d'ε-caprolactone
Enduit	Aucun
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 90 à 120 jours. Environ 60% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature


spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Urologie

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Chirurgie ophtalmologique


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

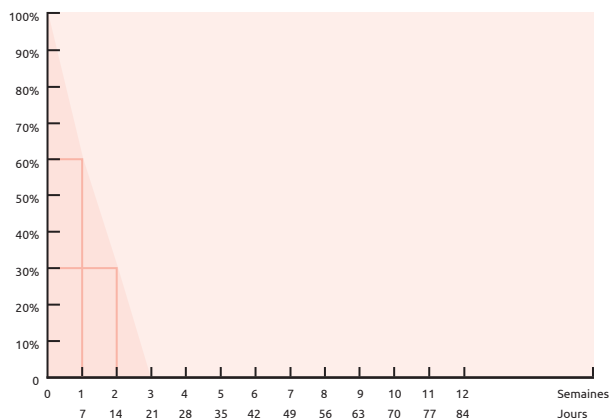

RÉSORPTION

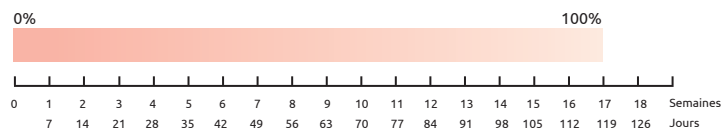










Without needle 	Metric	USP	Length	Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i> 16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i> 16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i> 16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i> 16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i> 16500015

Without needle 	Metric	USP	Length	Order number
--	--------	-----	--------	--------------

Ligapack

















5	2	250 cm	<i>violet</i> 16500025
---	---	--------	------------------------






Round bodied taper point 	Metric	USP	Length	Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 16070113
	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150113
HR 17 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200117
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300126
HR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 16350126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300130
HR 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 16350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i> 16400130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300136
HR 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400136
HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16300140
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350140
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400140


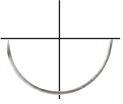


1/2 Circle










Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	16300165

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16101512V
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201516
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201516V
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151516P
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	16101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201519
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301519	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	16201519P	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524	
DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75	

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 16301526V
	DS 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 16351530V
DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 16351540	
	4	1	75 cm	<i>undyed</i> 16401540	

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i> 16401440


Cutting 		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16302160

Blunt 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRB 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16351840
	HRB 48 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i> 16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

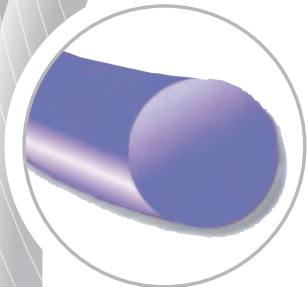

Type	Monofilament
Composition	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
Enduit	Aucun
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Persistance exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS

Rapprochement et soutien des tissus mous en général

spécialement

- Chirurgie générale
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie orthopédique
- Fermeture de la paroi abdominale
- Gynécologie
- Chirurgie plastique
- Urologie


CONTRE-INDICATIONS

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Prothèses


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION

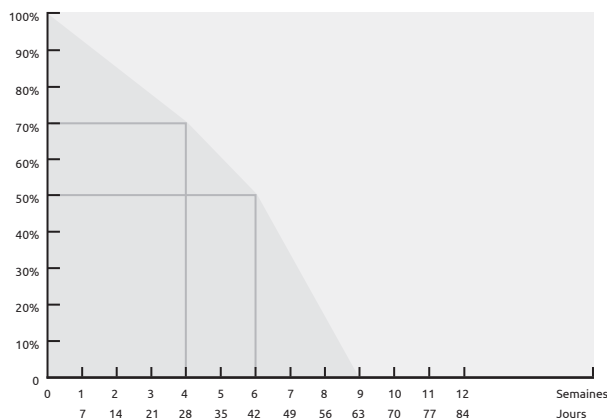

RÉSORPTION

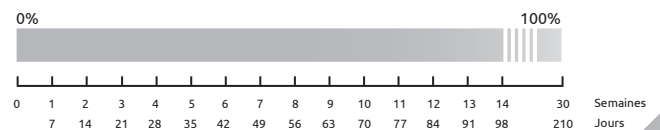

Without needle




	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015

Round bodied taper point



	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
HR 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
HR 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
HR 48 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
	5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148

1/2 Circle

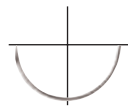

Round bodied taper point loop









		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	HR 40 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965

Reverse cutting




		Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
	DS 26 mm	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
5		2	90 cm	<i>violet</i>	13501540	

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 13401436

Blunt loop 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i> 13401850

CATGUT

PLAIN



Type	Multifilament tordu avec un aspect de monofilament
Composition	Tissu conjonctif purifié provenant de la séreuse intestinale de bovins sélectionnés (originaire de pays classifiés libres de ESB)
Enduit	Aucun
Couleur	Ivoire
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	Par phagocytose. Résorption totale du fil endéans les 63 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 7 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption par phagocytose
- Structure tordue

- Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Excellente attache des noeuds

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène

RÉSISTANCE À LA TRACTION

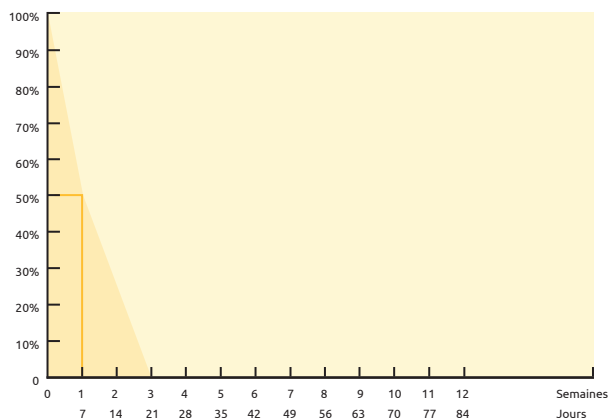

RÉSORPTION

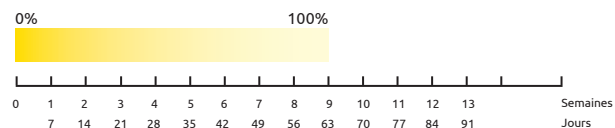

CATGUT

PLAIN










Without needle 

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>ivory</i>	1200015
3	3/0	150 cm	<i>ivory</i>	1300015
3.5	2/0	150 cm	<i>ivory</i>	1350015
4	0	150 cm	<i>ivory</i>	1400015
5	1	150 cm	<i>ivory</i>	1500015
6	2	150 cm	<i>ivory</i>	1600015

Round bodied taper point 

Metric USP Length Order number








	HR 16 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1150116	
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200116	
	HR 20 mm 	2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200120	
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300120	
	HR 26 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350120	
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200126	
	HR 26 mm 	3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300126	
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350126	
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400126	
	HR 37 mm 	3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300137	
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350137	
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400137	
	HR 40 mm 	5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90	
		HR 45 mm 	4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
			5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500145
	HR 50 mm 	6	2	75 cm	<i>ivory</i>	1600145	
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150	

smi

www.sutures.be


CATGUT

PLAIN

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number	
3/8 Circle 		DS 12 mm	1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512	
			1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516	
		DS 16 mm	1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516	
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516	
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516	
		DS 19 mm	2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519	
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519	
		DS 24 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519	
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524	
		DS 37 mm	3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524	
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524	
			4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524	
				3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537

CATGUT

CHROM

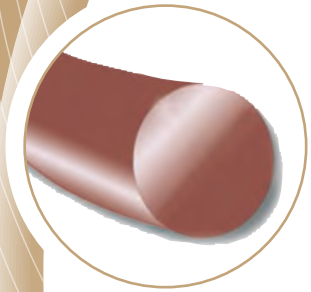

Type	Multifilament tordu avec un aspect de monofilament
Composition	Tissu conjonctif purifié provenant de la séreuse intestinale de bovins sélectionnés tanné avec des sels de chrome (originaire de pays classifiés libres de ESB)
Enduit	Aucun
Couleur	Brun foncé
Réaction tissulaire	Modérée
Résorption	Par phagocytose. La résorption est ralentie par le chrome. Résorption totale du fil endéans les 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 14 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*



www.sutures.be

CATGUT

CHROM

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption par phagocytose
- Structure tordue

- Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Excellente attache des noeuds

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène ou au chrome

RÉSISTANCE À LA TRACTION

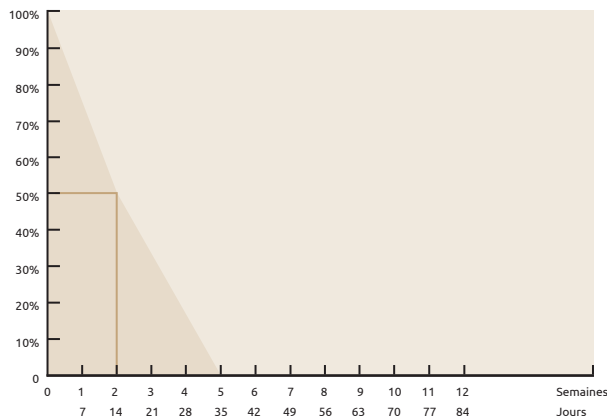

RÉSORPTION

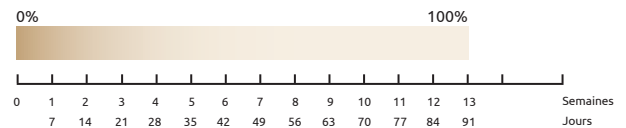

CATGUT

CHROM








Without needle 

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015

Round bodied taper point 

Metric USP Length Order number







HR 15 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
HR 26 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
HR 30 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
HR 37 mm		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
HR 37 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137





1/2 Circle














smi



www.sutures.be

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	 HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350140
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i>	2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600140
	 HR 45 mm	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600145
	 HR 48 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500148
	 HR 50 mm	6	2	75 cm	<i>brown</i>	2600150
		6	2	90 cm	<i>brown</i>	2600150-90

Round bodied taper point reverse cutting double armed 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	 HR 37 mm  HS 37 mm	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350137-1437


Blunt 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	 DRB 63 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501963

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
			1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301516
	DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201524
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301524
	DS 30 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524
	DS 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401530
	DS 40 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537
			4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540
			6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 37 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
			5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437

POLYPROPYLENE

BLUE

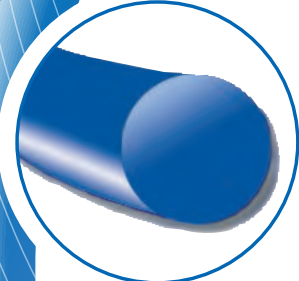

Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*



smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement










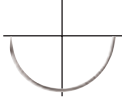

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques et anastomoses)
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties



INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Chirurgie ophtalmologique
- Microchirurgie
- Chirurgie plastique
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
- Chirurgie gastro-intestinale
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Obstétrique

Round bodied taper point 

			Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> 5050110
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070115
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100115
	HR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150115
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100117
	HR 20 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200117
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100120
	HR 25 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150120
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200120
	HR 30 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100125
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150125
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200125
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300125
	HR 35 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350125
			4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400125
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5200130
	HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300130
3.5			0	75 cm	<i>blue</i> 5350130	
4			1	75 cm	<i>blue</i> 5400130	
HR 35 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5400135	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300135	
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5350140	
		4	1	90 cm	<i>blue</i> 5400140	
			5	2	75 cm	<i>blue</i> 5500140

Round bodied taper point 


			Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5150216

Round bodied taper point
double armed



		Metric	USP	Length	Order number	
<p>1/2 Circle</p>	2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 5040108-2
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050108-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070108-2
	2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050110-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070110-2
			1	5/0	60 cm	<i>blue</i> 5100110-2
	2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050113-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070113-2
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100113-2
	2 x HR 16 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100116-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150116-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200116-2
	2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100120-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150120-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200120-2
	2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150125-2
			2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200125-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300125-2
	2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200130-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300130-2
	2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300135-2
HR 15 mm HR 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200115-30	

Round bodied taper point double armed

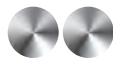










			Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> 5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050208-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070210-2
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070213-2
	2 x DR 13 mm		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100218-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150218-2

Reverse cutting























			Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071510
			0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> 5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071512
			1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i> 5071512P
			1	5/0	50 cm	<i>blue</i> 5101512P
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> 5071516
			1	5/0	45 cm	<i>blue</i> 5101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151516
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i> 5071516P
			1	5/0	50 cm	<i>blue</i> 5101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 5151516P
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5071519
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i> 5151519-45
			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 5151519
			2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201519-45
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201519
3			2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301519	
3.5			0	75 cm	<i>blue</i> 5351519	
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>blue</i> 5101519P	
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 5151519P	
			2	3/0	50 cm	<i>blue</i> 5201519P

Reverse cutting 

			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 Circle 	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151524	
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201524-45	
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201524	
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	5301524-45	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301524	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351524	
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401524	
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	5201524P	
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	5301524P	
	DS 26 mm 	2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201526-45	
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	5301526-45	
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301526	
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201530	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301530	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351530	
	DS 36 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401530	
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201536	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301536	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351536	
	DS 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401536	
3		2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301540		
3.5		0	75 cm	<i>blue</i>	5351540		
DS 45 mm 	4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401540		
	5	2	90 cm	<i>blue</i>	5501540		
DS 90 mm 	4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401545		
DS 90 mm	4	1	90 cm	<i>blue</i>	5401590		

Reverse cutting 

			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	HS 22 mm 	2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201422	
	HS 24 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301424	

Cutting 		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302160
	GS 75 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302175
Round bodied tapercut point double armed 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	2 x DRT 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070412-2
		Round bodied tapercut point 		Metric	USP
1/2 Circle 	HRT 10 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i> 5070510
	HRT 25 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5300525
Round bodied tapercut point double armed 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	2 x HRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100516-2
	2 x HRT 22 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150522-2
	2 x HRT 25 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150525-2
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200525-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300525-2
	2 x HRT 30 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300530-2

Soft cutting point coronary
double armed



3/8 Circle



		Metric	USP	Length		Order number	
2 x CC 8 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2	
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2	
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2	
	2 x CC 10 m		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052610-2
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072610-2
			0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052613-2
2 x CC 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2	
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2	

Soft cutting point coronary
black double armed



3/8 Circle




		Metric	USP	Length		Order number	
2 x CC 8 mm black		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2VB	
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2VB	
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2VB	
	2 x CC 13 mm black		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2VB
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2VB

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

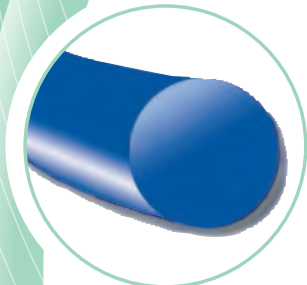

Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par du tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

The logo for SMI, featuring the letters 'smi' in a stylized, lowercase, blue font with a white outline. The 'i' has a dot above it.

www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature


Daclon Bleu

spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique

Daclon Noir

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

Round bodied taper point 


		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	HR 16 mm	1	5/0	75 cm	black	9100116
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150116
	HR 20 mm	0.7	6/0	75 cm	black	9070120
		1	5/0	75 cm	black	9100120
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150120
		2	3/0	75 cm	blue	9200120
		3	2/0	75 cm	blue	9300120
	HR 22 mm	2	3/0	75 cm	blue	9200122
		3	2/0	75 cm	blue	9300122
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	blue	9150126
		2	3/0	75 cm	blue	9200126
		3	2/0	75 cm	blue	9300126
		3.5	0	75 cm	blue	9350126
		4	1	75 cm	blue	9400126
	HR 30 mm	3	2/0	75 cm	blue	9300130
		3.5	0	75 cm	blue	9350130
		4	1	75 cm	blue	9400130
	HR 37 mm	3	2/0	75 cm	blue	9300137
3.5		0	75 cm	blue	9350137	
	4	1	75 cm	blue	9400137	
	3	2/0	75 cm	blue	9300140	
HR 40 mm	3.5	0	75 cm	blue	9350140	
	4	1	75 cm	blue	9400140	
	5	2	75 cm	blue	9500140	
HR 50 mm	4	1	100 cm	blue	9400150	

Round bodied taper point loop



		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	HR 30 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350930
		4	1	150 cm	blue	9400930
	HR 35 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350935
		4	1	150 cm	blue	9400935
	HR 40 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350940
		4	1	150 cm	blue	9400940
	HR 50 mm	3.5	0	150 cm	blue	9350950
		4	1	150 cm	blue	9400950


Round bodied taper point double armed

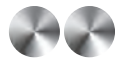









		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	2 x HR 65 mm	3	2/0	90 cm	blue	9300165-2

Reverse cutting







		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
2		3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201516	
DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P	
	1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P	
	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P	
DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45	
	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519	
	1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45	
	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519	
	2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45	
	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301519	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301519	
DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P	
	3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P	
DS 24 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524	
	1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45	
	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524	
	2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45	
	2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524	
	3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45	
	3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524	
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524	
	4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524	
5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524		
DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P	

Reverse cutting 

		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle			2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 9201526-45
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201526
			3	2/0	45 cm	<i>blue</i> 9301526-45
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301526
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201530	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301530	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351530	
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401530	
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201536	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301536	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351536	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301540	
3.5		0	75 cm	<i>blue</i> 9351540		
	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401540		
	3	2/0	100 cm	<i>blue</i> 9301545		
	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401545		
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351560		
	3	2/0	100 cm	<i>blue</i> 9301590		
	3.5	0	100 cm	<i>blue</i> 9351590		
	4	1	100 cm	<i>blue</i> 9401590		

Reverse cutting 

		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle			1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151417
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201422	
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201426	
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301426	
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351430	




Reverse cutting



		Metric	USP	Length	Color	Order number
--	--	--------	-----	--------	-------	--------------

1/2 Circle




HS 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351436	
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401436	
		5	2	75 cm	<i>blue</i>	9501436	
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351440
			4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401440
	HS 48 mm		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401448

Cutting



		Metric	USP	Length	Color	Order number
--	--	--------	-----	--------	-------	--------------

Straight

GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9302160


Cutting



		Metric	USP	Length	Color	Order number
--	--	--------	-----	--------	-------	--------------

3/8 Circle



NS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201726
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301730
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301740

SUPRAMID

BLACK



Type	Multifilament tordu et engainé Épaisseur du fil 5/0 et 6/0 monofilament
Composition	Fil de polyamide 6.6 enrobé par une couche de polyamide 6
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par du tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tordue

- ☑ Multifilament avec un manchon

- ☑ Pliabilité et souplesse

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent

- Réaction tissulaire minimale


- Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds





- Étanchéité et stérilité des produits garanties


INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature
spécialement Fermeture de peau

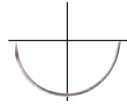Round bodied taper point  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/2 Circle




HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4200116
HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>black</i>	4200120
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4300126

Round bodied taper point  **Metric** **USP** **Length** **Order number**










Straight


GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i>	4152022
----------	---	-----	-----	-------	--------------	---------

Reverse cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**



1/2 Circle













HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201417
HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151420
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151422
HS 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	4151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	4301426




Cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

Straight


GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i>	4152120
GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>black</i>	4152125

Reverse cutting 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 19 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
	DS 24 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536
3.5		0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
		4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418

SILK

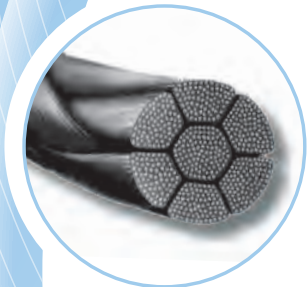

	<i>Soie tressée</i>	<i>Soie nature</i>
Type	Multifilament tressé	Multifilament tordu
Composition	Fibres tressées du cocon du ver à soie	Fibres tordues du cocon du ver à soie
Enduit	Silicone	Aucun
Couleur	Noir	Bleu
Réaction tissulaire	Modérée	
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale dans le tissu, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par du tissu conjonctif fibreux	
Présentation	Boîte de 12 pochettes	

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

SILK

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Structure tressée ou tordue
- ✓ Multifilament enduit
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie buccale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Voies urinaires
Voies biliaires

Sensibilisation ou allergie connue à la soie

Without needle



Metric **USP** **Length** **Order number**

2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
5	2	17 x 45 cm	<i>black</i>	8500046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075

Without needle



Ligapack



Metric **USP** **Length** **Order number**

2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025

Round bodied taper point



		Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 Circle 	HR 12 mm	0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
	HR 16 mm	0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
	HR 20 mm	2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
	HR 26 mm	2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
	HR 30 mm	1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
3		2/0	75 cm	black	8300126	
3.5		0	75 cm	black	8350126	
4		1	75 cm	black	8400126	
HR 37 mm	5	2	75 cm	black	8500126	
	2	3/0	75 cm	black	8200130	
	3	2/0	75 cm	black	8300130	
	3.5	0	75 cm	black	8350130	
HR 40 mm	4	1	75 cm	black	8400130	
	5	2	75 cm	black	8500130	
	2	3/0	75 cm	black	8200137	
HR 45 mm	3	2/0	75 cm	black	8300137	
	3.5	0	75 cm	black	8350137	
	4	1	75 cm	black	8400137	
HR 45 mm	5	2	75 cm	black	8500137	
	3.5	0	75 cm	black	8350140	
HR 45 mm	4	1	75 cm	black	8400140	
	5	2	75 cm	black	8500140	
HR 45 mm	3.5	0	75 cm	black	8350145	
	4	1	75 cm	black	8400145	
HR 45 mm	5	2	75 cm	black	8500145	

Round bodied taper point



		Metric	USP	Length	Order number
--	--	--------	-----	--------	--------------

3/8 Circle



DR 12 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8100212
DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200216
DR 25 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300225
DR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300230

Round bodied taper point



		Metric	USP	Length	Order number
--	--	--------	-----	--------	--------------

Straight

GR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302040
----------	--	---	-----	-------	--------------	---------

Reverse cutting



		Metric	USP	Length	Order number
--	--	--------	-----	--------	--------------

3/8 Circle












		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512
DS 12 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	8071512P
DS 14 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071514
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101516
DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201516
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301516
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i>	8151516P

Reverse cutting 

3/8 Circle



		Metric	USP	Length	Color	Order number
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071519
		1	5/0	75 cm	black	8101519
		1.5	4/0	75 cm	black	8151519
		2	3/0	75 cm	black	8201519
		3	2/0	75 cm	black	8301519
		3.5	0	75 cm	black	8351519
		4	1	75 cm	black	8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	black	8151519P
		2	3/0	50 cm	black	8201519P
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black	8101524
		1.5	4/0	75 cm	black	8151524
		2	3/0	75 cm	black	8201524
		3	2/0	75 cm	black	8301524
		3.5	0	75 cm	black	8351524
4	1	75 cm	black	8401524		
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	black	8201524P
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8201526
		3	2/0	75 cm	black	8301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151530
		2	3/0	75 cm	black	8201530
		3	2/0	75 cm	black	8301530
		3.5	0	75 cm	black	8351530
		4	1	75 cm	black	8401530
		5	2	75 cm	black	8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	black	8201537
		3	2/0	75 cm	black	8301537
		3.5	0	75 cm	black	8351537
		4	1	75 cm	black	8401537
		5	2	75 cm	black	8501537
		6	3&4	75 cm	black	8601537
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	black	8301545
		3.5	0	75 cm	black	8351545
		4	1	75 cm	black	8401545
DS 60 mm		5	2	75 cm	black	8501545
		3	2/0	75 cm	black	8301560
		4	1	75 cm	black	8401560

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



DS 90 mm



3.5

0

100 cm

black

8351590

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



HS 12 mm



0.7

6/0

75 cm

black

8071412

HS 17 mm



1

5/0

75 cm

black

8101417

1.5

4/0

75 cm

black

8151417

2

3/0

75 cm

black

8201417

HS 20 mm



1.5

4/0

75 cm

black

8151420

2

3/0

75 cm

black

8201420

HS 22 mm



1

5/0

75 cm

black

8101422

1.5

4/0

75 cm

black

8151422

2

3/0

75 cm

black

8201422

3

2/0

75 cm

black

8301422

HS 26 mm



1

5/0

75 cm

black

8101426

1.5

4/0

75 cm

black

8151426

2

3/0

75 cm

black

8201426

3

2/0

75 cm

black

8301426

3.5

0

75 cm

black

8351426

HS 36 mm



3.5

0

75 cm

black

8351436

4

1

75 cm

black

8401436

Cutting



Metric

USP

Length

Order number

Straight



GS 40 mm



3

2/0

75 cm

black

8302140

GS 60 mm



2

3/0

75 cm

black

8202160

3

2/0

75 cm

black

8302160

3.5

0

75 cm

black

8352160





4




1

75 cm

black

8402160

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
	HRT 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert Blanc
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par du tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégalée, non résorbable
- ☑ Résistance aux pliages répétés
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée

- ☑ Multifilament enduit

- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent

- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques)

- Réaction tissulaire minimale

- Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement

- Chirurgie cardiovasculaire
- Chirurgie ophtalmologique
- Chirurgie générale
- Fermeture de peau
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie gastro-intestinale
- Obstétrique

POLYESTER

Without needle



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	green	7150015
2	3/0	150 cm	green	7200015
3	2/0	150 cm	green	7300015
3.5	0	150 cm	green	7350015
4	1	150 cm	green	7400015
5	2	150 cm	green	7500015
6	3&4	150 cm	green	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	green	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	green	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	green	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	green	7350045
4	1	6 x 45 cm	green	7400045
5	2	6 x 45 cm	green	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	green	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	green	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	green	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	green	7350050
4	1	3 x 50 cm	green	7400050
5	2	3 x 50 cm	green	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	green	7200075-2

Without needle













Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	green	7150025
2	3/0	250 cm	green	7200025
3	2/0	250 cm	green	7300025
3.5	0	250 cm	green	7350025
4	1	250 cm	green	7400025
5	2	250 cm	green	7500025
6	3&4	250 cm	green	7600025





Round bodied taper point







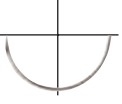










			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7100116
			1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150116
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200116
	HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150120
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200120
	HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200126
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300126
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350126
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7400126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200130
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300130
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350130
	HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400130
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300136
	HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7350136
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7400136
	HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7300140
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7400140
5			2	75 cm	<i>green</i>	7500140	
HR 48 mm		7	5	75 cm	<i>green</i>	7700140	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7400148	
HR 48 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7500148	





Round bodied taper point double armed












			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300117-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300120-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300126-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300120-2	
		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300126-2	
2 x HR 26 mm		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300126-2	
		3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300126-2	

Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 16 mm HR 36 mm		2	3/0	60 cm	<i>green</i>	7200116-36
Round bodied taper point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle  Straight 	HR 26 mm GR 19 mm	 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200126-2019
Round bodied taper point			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>green</i>	7152019
			2	3/0	50 cm	<i>green</i>	7202019
Round bodied tapercut point double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>green</i>	7150517-2
			2	3/0	90 cm	<i>green</i>	7200517-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300517-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i> 10/foil	7300517-2-10
						with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300517-2P
	2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	<i>green</i>	7200525-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i>	7300525-2
			3	2/0	90 cm	<i>green</i> 10/foil	7300525-2-10
						with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300525-2P

Round bodied tapercut point 





			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7150518
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7200518
	HRT 40 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7500540
	HRT 55 mm		7	5	4 x 75 cm	<i>green</i>	7700555-4

Reverse cutting 

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	<i>green</i>	7101512
			1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101516
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151516
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201516
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519
	DS 24 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301519
			2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201524
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301524
	DS 26 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351524
			1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151526
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301526
	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
			3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301530
			3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530
			4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301536
5			2	75 cm	<i>green</i>	7501536	
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540	
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540	

POLYESTER

Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151417
			2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	green	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	green	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7201426
			3	2/0	75 cm	green	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	green	7301430
			3.5	0	75 cm	green	7351430
			4	1	75 cm	green	7401430
	HS 36 mm		5	2	75 cm	green	7501430
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351436
			4	1	75 cm	green	7401436
HS 48 mm		4	1	75 cm	green	7401436	
HS 40 mm		5	2	75 cm	green	7501440	
HS 48 mm		6	3&4	75 cm	green	7601448	
		7	5	75 cm	green	7701448	


Cutting

Straight

			Metric	USP	Length		Order number
	GS 60 mm		3.5	0	75 cm	green	7352160

STEEL

MONOFILAMENT

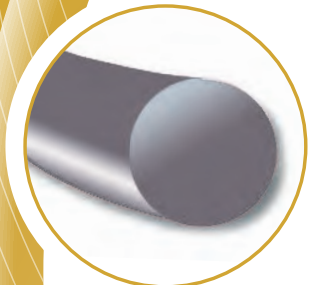

Type	Monofilament
Composition	Alliage de fer, nickel et chrome
Enduit	Aucun
Couleur	Métallique
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

The logo for SMI, consisting of the lowercase letters 'smi' in a bold, blue, sans-serif font. The 'i' has a dot. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Synthétique
- ✓ Ductile et malléable
- ✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Fermeture de sternotomie
Chirurgie orthopédique
Fermeture de la paroi abdominale et cures de hernies

AVANTAGES

Soutien tissulaire permanent

Réaction tissulaire minimale





Bonne maniabilité

Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent







Étanchéité et stérilité des produits garanties


CONTRE-INDICATIONS Sensibilisation ou allergie connue à l'acier inoxydable ou à l'un des constituants du fil tel que le chrome ou le nickel



Round bodied tapercut point  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/2 Circle 	HRT 40 mm		6	3&4	4 x 45 cm	ST45
	HRT 48 mm		7	5	4 x 45 cm	ST55
			8	6	4 x 45 cm	ST65
HRT 54 mm		7	5	1 x 75 cm	ST54	

Reverse cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/2 Circle 	HS 25 mm		3.5	0	4 x 45 cm	ST01
	HS 40 mm		4	1	4 x 45 cm	ST11
			5	2	4 x 45 cm	ST21
	HS 48 mm		6	3&4	4 x 45 cm	ST41
	HS 50 mm		7	5	1 x 75 cm	ST53
			7	5	4 x 45 cm	ST51
			8	6	4 x 45 cm	ST61
	HS 58 mm		7	5	4 x 45 cm	ST52
8			6	4 x 45 cm	ST62	

Cutting  **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/2 Circle 	NH 48 mm		7	5	4 x 45 cm	ST56
			8	6	4 x 45 cm	ST63
			9	7	4 x 45 cm	ST72

















MICROCHIRURGIE




*Pour qualité
&
sécurité*


smi

www.sutures.be

Micro needle taper point 	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 Circle 	MDR 3,3 mm 50µm		0.1	11/0	10 cm	<i>black</i>	MN111
	MDR 3,8 mm 50µm		0.2	10/0	10 cm	<i>black</i>	MN102
	MDR 5,1 mm 70µm		0.01	12/0	10 cm	<i>black</i>	MN124
			0.1	11/0	10 cm	<i>black</i>	MN114
	MDR 3,8 mm 70µm		0.2	10/0	10 cm	<i>black</i>	MN104
			0.1	11/0	10 cm	<i>black</i>	MN113
	MDR 3,8 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN105
	MDR 5,1 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	<i>black</i>	MN106
			0.3	9/0	15 cm	<i>black</i>	MN096
MDR 6,4 mm 140µm		0.4	8/0	15 cm	<i>black</i>	MN087	
MDR 9,7 mm 200µm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	MN078	

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 						
	MDR 5,1 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> MP106
	MDR 6,4 mm 150µm		0.3	9/0	15 cm	<i>blue</i> MP097

Micro needle taper point		Metric	USP	Length	Order number
3/8 Circle 	 MDR 6,4 mm 150µm	 0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i> M910087

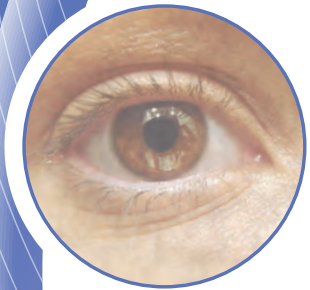












OPHTALMOLOGIE

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6,2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6,4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
Side cutting spatula			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DSP 6,2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05

Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HSP 8 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	200 µm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DSP 6 mm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	200 µm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 11 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/4 Circle 	2 x VSP 8 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005

OPHTHALMIC SURGERY

SILK
VIRGIN
BLUE

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,5 mm
200 µm



0.4

8/0

45 cm

blue

OS81

OPHTHALMIC SURGERY

SILK
BRAIDED
BLACK

Side cutting spatula double armed



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,5 mm
200 µm



0.4

8/0

45 cm

black

OS81B

2 x DSP 6,5 mm
240 µm



0.5

7/0

45 cm

black

OS71

2 x DSP 8 mm
350 µm



0.7

6/0

45 cm

black

OS61

1

5/0

30 cm

black

OS52

Side cutting spatula double armed




Metric

USP

Length

Order number

1/4 Circle

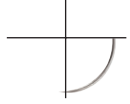

2 x VSP 8 mm
250 µm



0.7

6/0

45 cm

black

OS62

2 x VSP 10 mm
350 µm



1

5/0

45 cm

black

OS51

Round bodied taper point double armed



Metric USP Length Order number

1/4 Circle



2 x VR 8 mm
220 µm 0.4 8/0 45 cm *black* ON81

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

1/2 Circle



2 x HSP 6,2 mm
150 µm 0.2 10/0 30 cm *black* ON102

2 x HSP 6,4 mm
220 µm 0.2 10/0 30 cm *black* ON106

2 x HSP 8 mm
300 µm 0.7 6/0 45 cm *black* ON62

Side cutting spatula double armed



Metric USP Length Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6 mm
220 µm 0.2 10/0 30 cm *black* ON103

2 x DSP 6,2 mm
150 µm 0.1 11/0 20 cm *black* ON111

2 x DSP 6,2 mm
150 µm 0.2 10/0 30 cm *black* ON101

2 x DSP 6,2 mm
150 µm 0.3 9/0 30 cm *black* ON95

2 x DSP 6,2 mm
150 µm 0.3 9/0 45 cm *black* ON95-45

2 x DSP 6,2 mm
150 µm 0.4 8/0 30 cm *black* ON85

2 x DSP 6,2 mm
150 µm 0.4 8/0 45 cm *black* ON85-45

2 x DSP 6,2 mm
150 µm 0.5 7/0 30 cm *black* ON75

2 x DSP 6,4 mm
220 µm 0.2 10/0 30 cm *black* ON105

2 x DSP 6,4 mm
220 µm 0.2 10/0 45 cm *black* ON105-45

2 x DSP 8 mm
300 µm 0.7 6/0 45 cm *black* ON61

Side cutting spatula double armed









Metric USP Length Order number

1/4 Circle



2 x VSP 8 mm
220 µm 1 5/0 45 cm *black* ON51

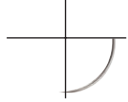Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle			1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP53
2 x DSP 8 mm 300 µm							
Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/4 Circle			0.5	7/0	45 cm	<i>white</i>	OP71
			2 x VSP 8 mm 350 µm				
			0.7	6/0	45 cm	<i>white</i>	OP61
			2 x VSP 8 mm 300 µm				
			1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP51
			1.5	4/0	45 cm	<i>white</i>	OP41

**Side cutting spatula
double armed**



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



2 x DSP 6,4 mm
200 µm



0.2

10/0

30 cm

blue

OPP105

**Side cutting spatula
double armed**



Metric

USP

Length

Order number

Straight

2 x GSP 16,15 mm
150 µm



0.2

10/0

20 cm

blue

OPP101



AUTRES ARTICLES

*Pour qualité
&
sécurité*



www.sutures.be

Agrafeuse chirurgicale cutanée & ôte-agrafes


INDICATIONS:

L'agrafeuse chirurgicale cutanée SMI peut être utilisée pour diverses fermetures de peau.

AVANTAGES:

- ☑ *Design ergonomique et manipulation aisée*
- ☑ *Vue dégagée sur le champ opératoire*
- ☑ *Facilité de vérifier le nombre d'agrafes restantes*

Staple size

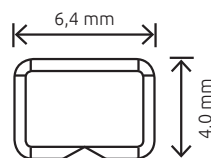

1. agrafeuse chirurgicale avec 35 agrafes
2. ôte-agrafes à usage unique
3. ôte-agrafes à usage unique 2

ZS35W
ZSR
ZSR2

Biopsy Punch

Punch à biopsie dermique stérile pour des prélèvements précis et sûrs

Bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure

Manche cranté qui assure une bonne préhension de l'instrument



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	15 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	15 pc.	ZBP12

Support pour matériel de suture en pochettes

Support & tiroir pour support



Le système de support flexible permet un rangement ordonné des sutures en pochettes. Ainsi le matériel de suture reste facilement accessible pendant l'opération.

Différentes constellations sont possibles avec des pièces interchangeables.

1 support pour 2 boîtes à pochettes horizontales
(125 mm x 72 mm x 143 mm) Z070

tiroir pour support

Z07171

Treillis de polypropylène

INDICATIONS:

solution de renforcement de la paroi abdominale

- hernie
- eventration

par coelioscopie ou laparotomie

COMPOSITION:


treillis élastique et durable de polypropylène monofilament

AVANTAGES:

- ✓ *Stabilité dimensionnelle extrême*
- ✓ *Structure du treillis très fine*
- ✓ *Porosité idéale*
- ✓ *Transparence excellente*
- ✓ *Bonnes propriétés de manipulation*
- ✓ *Facile à couper*
- ✓ *Bien toléré*

Treillis carrés et rectangulaires

LIGHT MESH 5 pc.	15 cm x 15 cm	ZML1515
	30 cm x 30 cm	ZML3030
	6 cm x 11 cm	ZML0611
	10 cm x 15 cm	ZML1015
	7,5 cm x 15 cm	ZML07515
STANDARD MESH 5 pc.	15 cm x 15 cm	ZMS1515
	30 cm x 30 cm	ZMS3030
	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	7,5 cm x 15 cm	ZMS07515
	5 cm x 10 cm	ZMS0510
HEAVY MESH 5 pc.	15 cm x 15 cm	ZMH1515
	30 cm x 30 cm	ZMH3030
	6 cm x 11 cm	ZMH0611
	10 cm x 15 cm	ZMH1015
	7,5 cm x 15 cm	ZMH07515

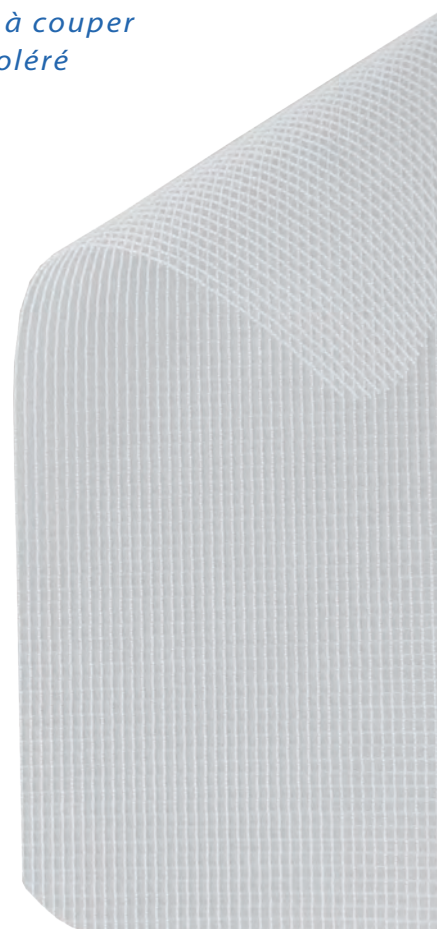

Obturateur

PLUG MESH 5 pc.	7 cm Ø - onlay 5 x 10 cm	ZMP7
	9 cm Ø - onlay 5 x 10 cm	ZMP9
	11 cm Ø - onlay 5 x 10 cm	ZMP11

obturateur
plat



obturateur
formé



implant



Lames chirurgicales et bistouris

Pour manche
de bistouri N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

lames de bistouri
sans manche

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

bistouris jetables avec
manche en plastique

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Pour manche
de bistouri N° 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

lames de bistouri
sans manche

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

bistouris jetables avec
manche en plastique

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSITION:
acier de carbone

PRESENTATION:
pochettes individuelles stériles

sans manche 100 / boîte
avec manche en plastique 10 / boîte

Coupe-fils



ZBS

Manche de bistouri

COMPOSITION: acier inoxydable

PRESENTATION: 10/ boîte



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Episio Set

Surgicryl® Rapid: Synthétique absorbable acide polyglycolique – multifilament tressé et enduit - absorption rapide

Aiguille triangulaire

Aiguille ronde pointe tranchante



Référence

3/8 Cercle



1/2 Cercle



DS 26 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

non
coloré

S-1430-1435

1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
1 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

non
coloré

S-1430-1435-1

Set de cerclage du col utérin

set de cerclage du col de l'utérus selon Shirodkar

2 x aiguille émoussée

Référence



2 x HRB 50 mm

4 mm bande de polyester 40 cm

ZCE1

4 mm bande de polyester 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

4 mm bande de polyester 50 cm

ZCE3

Patella Set

Aiguille triangulaire conventionnelle



Metric

USP

Longueur

Référence

1/2 Cercle



NH 120 mm



9

7

60 cm

ST75

Pilomat

Ecraseur de comprimés

Z045

Pour écraser les comprimés en tour de main.



Coupe comprimés

Z044

Pour couper les comprimés de toute un simple taille en deux.



Aiguilles

12 dans une boîte

1/2 Cercle



chas fermé
GN



chas à
ressort GF



chas fermé
GRN



chas à
ressort GRF



90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

AIGUILLE CORDEE (SKI)



chas à ressort



chas fermé









80 mm N°1	Z 202	
70 mm N°2	Z 203	
65 mm N°3	Z 204	
60 mm N°4	Z 205	
57 mm N°5	Z 201	
55 mm N°6	Z 206	
50 mm N°7	Z 207	
45 mm N°8	Z 208	
40 mm N°9		Z 260
35 mm N°10		Z 261
30 mm N°12		Z 262
25 mm N°13		Z 263
20 mm N°15		Z 264
16 mm N°16		Z 266
12 mm N°20		Z 268



3/8 Cercle



			
	chas fermé BN	chas à ressort BF	chas fermé BRN
			

	chas fermé BN	chas à ressort BF	chas fermé BRN	chas à ressort BRF	chas fermé BRT
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568			

DROITE



chas fermé GSN

chas à ressort GSF



75 mm N° 1			Z 904
60 mm N° 4	Z 903		Z 913
45 mm N° 8	Z 902		
40 mm N° 9			Z 912
35 mm N° 10			Z 911

Marqueur pour la peau

Pour marquage général de la peau. Encre violet de gentiane indélébile. Biocompatible, non toxique et non irritant. Avec règle en centimètres et en pouces.

ZSM 20 double pointe, marqueur à pointe régulière et fine avec règle, stérile



Cire à os



12 x 2.5 g Z046

COMPOSITION:

Cire d'abeille blanc raffinée, paraffine et palmitate d'isopropyle

INDICATIONS:

contrôle des saignements des surfaces osseuses en agissant comme barrière mécanique

PRESENTATION:

une pièce de 2.5 g par pochette stérile, boîtes de 12

SMI Spon


Éponge de gélatine résorbable

COMPOSITION:

Gélatine de première qualité hautement purifiée

INDICATIONS:

Pour usage dans diverses procédures chirurgicales. Prévue pour être utilisée à des fins hémostatiques par application sur une surface hémorragique. Non pyrogène et biocompatible.

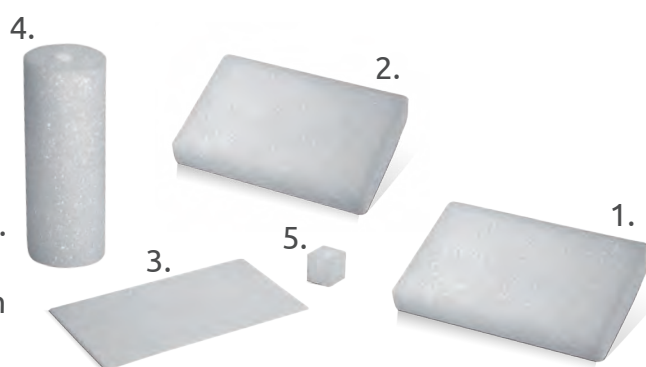

1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010